

# ELOS ME & LESCOLTON

## HANDBUCH INFINITY DUAL SYSTEM



390 Market St 200  
San Francisco, CA, 94102

Fragen? Kontaktieren Sie uns per Live-Chat oder per E-Mail:  
[info@elosme-lescolton.com](mailto:info@elosme-lescolton.com)

## INDEX

<b>Produkteinführung</b> .....	<b>03</b>
<b>Gegenanzeigen</b> .....	<b>03</b>
<b>Überlegungen</b> .....	<b>03</b>
<b>Sicherheitswarnung</b> .....	<b>03</b>
<b>Sicherheitsbetriebsregeln</b> .....	<b>03</b>
<b>Produktstruktur</b> .....	<b>04</b>
<b>Benutzung des Geräts</b> .....	<b>05</b>
<b>Permanente Haarentfernungsbehandlung</b> .....	<b>05</b>
<b>Behandlungsintervalle</b> .....	<b>06</b>
<b>Behandlung zur Hautverjüngung</b> .....	<b>06</b>
<b>Einfache Fehlerbehebungstabelle</b> .....	<b>07</b>
<b>Garantieregistrierung</b> .....	<b>07</b>

## EINFÜHRUNG

- Das neue von Elos Me entworfene Lescolton ist ein duales System mit der Funktion der Epilation und Hautverjüngung. Es integriert die multiterm E-Light-Anwendung der elektronischen optischen Lichttechnologie im Bereich Schönheit und Gesundheit.
- Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen sorgfältig durch.
- Geeignet für Männer und Frauen.
- Menschen mit dunkler Haut sollten auf der niedrigsten Stufe beginnen und sich dann entsprechend der Anpassungsfähigkeit ihrer Haut auf die entsprechende Stufe einstellen.

## Kontraindikationen

- Nicht für Personen unter 16 Jahren geeignet
  - Nicht benutzen, wenn Sie eine Entzündung auf der Haut haben.
  - Nicht benutzen, wenn Sie lichtempfindlich sind
  - Nicht benutzen, wenn Sie ein implantiertes medizinisches, elektronisches Gerät haben, das Fehlfunktionen verursachen kann.
- Überlegungen
- Das Produkt wurde nicht an schwangeren Frauen getestet.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht direkt auf Tätowierungen, da diese viel Energie aufnehmen können.
  - Verwenden Sie es nicht um die Augen, den Hals oder die Brustwarzen, da die Haut dieser Bereiche relativ anfällig ist.
  - Wenn die Haut nach 24 Stunden weiterhin entzündet oder gereizt ist, stellen Sie die Anwendung ein, bis die Symptome verschwunden sind.

## Sicherheitswarnungen



- Blockieren Sie die Lüftungsschlitze während des Gebrauchs nicht.
- Lassen Sie kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Gerät eindringen.
- Die Verwendung des Geräts unter brennbaren oder explosiven Bedingungen ist verboten.

## Sicherheitsbestimmungen

- Richten Sie das Licht nicht auf die Augen.

- Schauen Sie nicht direkt ins Licht.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Sie alle Metallgegenstände wie Ringe, Armbänder usw. entfernt haben, um Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Maschine in einem Raum mit einer Temperatur unter 25 Grad Celsius.

## Produktstruktur

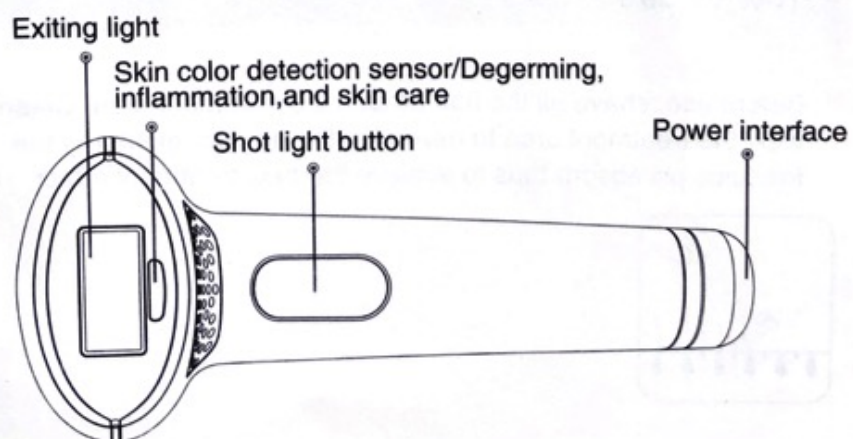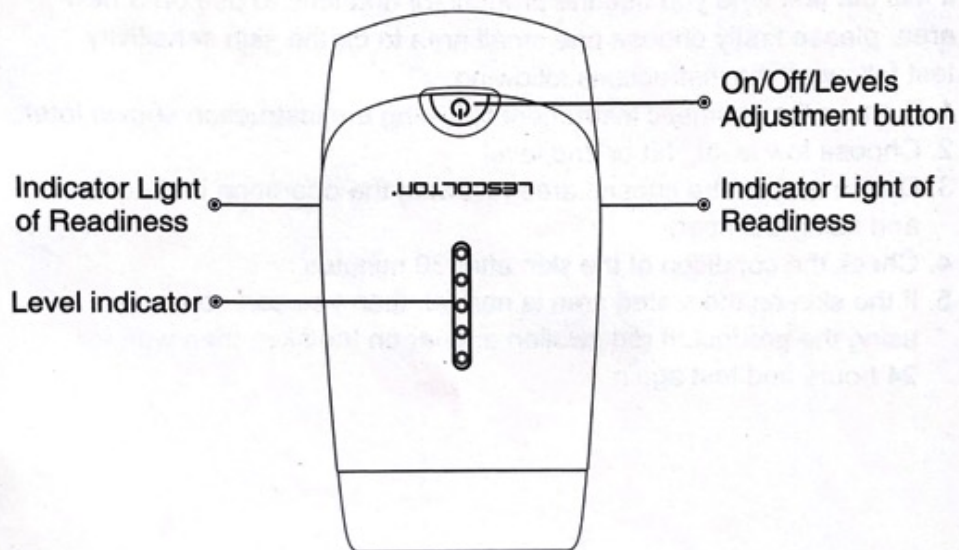

## WIE BENUTZT MAN

### Permanente Haarentfernungsbehandlung

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Haare um den Stufenbereich mit Wachs. Wenn es nicht gewachst werden kann, kann es den Bereich beeinträchtigen.

Stecken Sie das Netzkabel in die Maschine und schließen Sie es an.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie es 2 oder 3 Sekunden lang drücken, bis sich das Gerät einschaltet.

Wählen Sie mit demselben Netzschalter die gewünschte Leistungsstufe aus. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, erhöht sich die Leistungsstufe. Wenn Sie sehen, dass die geringe Leistung kein Kribbeln oder Unbehagen hervorruft, dann ist es besser, die höchstmögliche Leistung auszuwählen.

Halten Sie die Lampe auf Ihre Haut und drücken Sie den Feuerknopf am Griff des Geräts, sobald die grünen Lichter an den Seiten des Geräts blinken. Wiederholen Sie die Aufnahmen im gleichen Bereich zwei- oder dreimal, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Um den nächsten Schuss abzufeuern, müssen Sie warten, bis die grünen Lichter an der Seite der Maschine blinken.

Damit die Maschine automatisch feuert, ohne den Feuerknopf zu drücken, können Sie den automatischen Verwendungsmodus verwenden. Um in den Automatikmodus zu wechseln, drücken Sie den Auslöser zwei bis drei Sekunden lang, bis zwei Pieptöne ertönen. Auf diese Weise gibt die Maschine automatisch die Schüsse aus, wenn die Lampe auf der Haut ruht. Halten Sie die Lampe so lange an die Haut, bis 2 oder 3 Schüsse abgegeben wurden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Um zum manuellen Aufnahmemodus zurückzukehren, muss der Feuerknopf erneut 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt werden, bis erneut zwei Pieptöne zu hören sind

## Behandlungsintervalle

Behandeln Sie den ersten Monat alle 3-5 Tage, den zweiten Monat wöchentlich, den dritten Monat alle 15 Tage und ab dem vierten Monat alle 30 Tage, bis die Haare dauerhaft entfernt sind.

Die dauerhafte Haarentfernung ist ein mehrmonatiger Prozess. Die Ergebnisse werden aus zwei Gründen nicht sofort angezeigt:

- 1- Es muss gewartet werden, bis sich das gesamte Körperhaar im aktiven Wachstumsstadium befindet, damit es von der Behandlung betroffen sein kann. Dafür muss man einige Monate warten.
- 2- Es ist notwendig, mehrere Behandlungen für die Haare durchzuführen, die sich im aktiven Wachstumsstadium befinden, um die Haarwurzel zu schwächen, bis sie dauerhaft betroffen ist und das Haar nicht mehr nachwächst.

Die Änderungen werden im Laufe der Monate bemerkt.

Menschen mit blonden, grauen oder roten Haaren benötigen normalerweise doppelt so viele Sitzungen wie Menschen mit schwarzen und braunen Haaren, sodass die Behandlung auf 6 bis 12 Monate verlängert werden kann.

## Hautverjüngungsbehandlung

Für diese Behandlung muss die Lampe gewechselt werden.

Ziehen Sie bei ausgeschalteter Maschine an der Lampe, um sie zu entfernen, und setzen Sie die Verjüngungslampe ein.

## Spezifikationen

Größe der Haupteinheit: 182x78x151mm

Packungsgröße (Box): 231x191x93mm

Stromversorgung: Eingang: 100-240 V AC-50/60 Hz

Gewicht: 1,1 kg

Bestrahlungsfläche: 4 cm<sup>2</sup>

Außenumgebung: Temperatur: - 20 - 50 Grad Celsius

Garantie: 4 Jahre Garantie.

## Einfache Fehlerbehebungstabelle

- Kein Strom: Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.
- Die Maschine kann nicht gestartet werden: Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste 2 Sekunden lang.
- Die Füllstandsanzeige blinkt nach dem Start: Die Patrone ist nicht richtig installiert.
- Automatische Abschaltung: Die Maschine schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus, wenn sie nicht verwendet wird.

## Garantieregistrierung

Sie können Ihre 4-jährige Garantiezeit über diesen Link registrieren:

<https://elosme.com/warranty.php>

Enviar comentarios

Historial

Guardadas

Comunidad