

# ELOS ME & LESCOLTON

## MANUAL DEL USUARIO INFINITY DUAL SYSTEM



390 Market St 200  
San Francisco, CA, 94102

Questions? Get in touch with us by live chat or email us:  
[info@elosme-lescolton.com](mailto:info@elosme-lescolton.com)

## ÍNDICE

Introducción del producto.....	03
Contraindicaciones .....	03
Consideraciones .....	03
Advertencia de seguridad.....	03
Normas de funcionamiento de seguridad .....	03
Estructura del producto .....	04
Modo de uso .....	05
Tratamiento de depilación permanente .....	05
Intervalos de tratamiento .....	06
Tratamiento de rejuvenecimiento de la piel .....	06
Especificaciones .....	06
Tabla de solución de problemas simple .....	07
Registro de garantía .....	07

## **INTRODUCCIÓN**

- El nuevo Lescolton diseñado por Elos Me es un sistema dual, con la función de depilación y rejuvenecimiento de la piel. Integra la aplicación multiterm e-light de la tecnología óptica de luz electrónica en el campo de la belleza y la salud.
- Antes de usar, lea atentamente las instrucciones.
- Adecuado para hombres y mujeres.
- Las personas con piel oscura deben comenzar con el nivel más bajo y luego ajustarse al nivel adecuado según la adaptabilidad de su piel.

## **Contraindicaciones**

- Personas menores de 16 años.
- Si usted tiene Inflamación de la piel.
- Si usted padece fotosensibilidad.
- Si usted tiene un dispositivo electrónico médico implantado que puede provocar errores de funcionamiento.

## **Consideraciones**

- El producto no ha sido probado en mujeres embarazadas.
- No utilice el producto directamente sobre tatuajes, ya que pueden absorber una gran cantidad de energía.
- No lo use alrededor de los ojos, el cuello o los pezones ya que la piel de estas áreas es relativamente vulnerable.
- Si la piel continúa inflamada o irritada después de 24 horas, suspenda su uso hasta que desaparezcan los síntomas.

## **Advertencias de Seguridad**


- No bloquee las rejillas de ventilación durante el uso.
- No permita que entre agua ni humedad en el dispositivo.
- El uso del dispositivo en condiciones inflamables o explosivas está prohibido.

## **Reglamento de seguridad operacional**

- No apunte la luz a los ojos.
- No mire directamente a la luz.

- Antes de usar, asegúrese de haber eliminado todos los objetos metálicos, como anillos, pulseras, etc., para evitar el mal funcionamiento del dispositivo.
- Utilice la máquina en una habitación con una temperatura inferior a 25 grados centígrados.

**Estructura del producto**

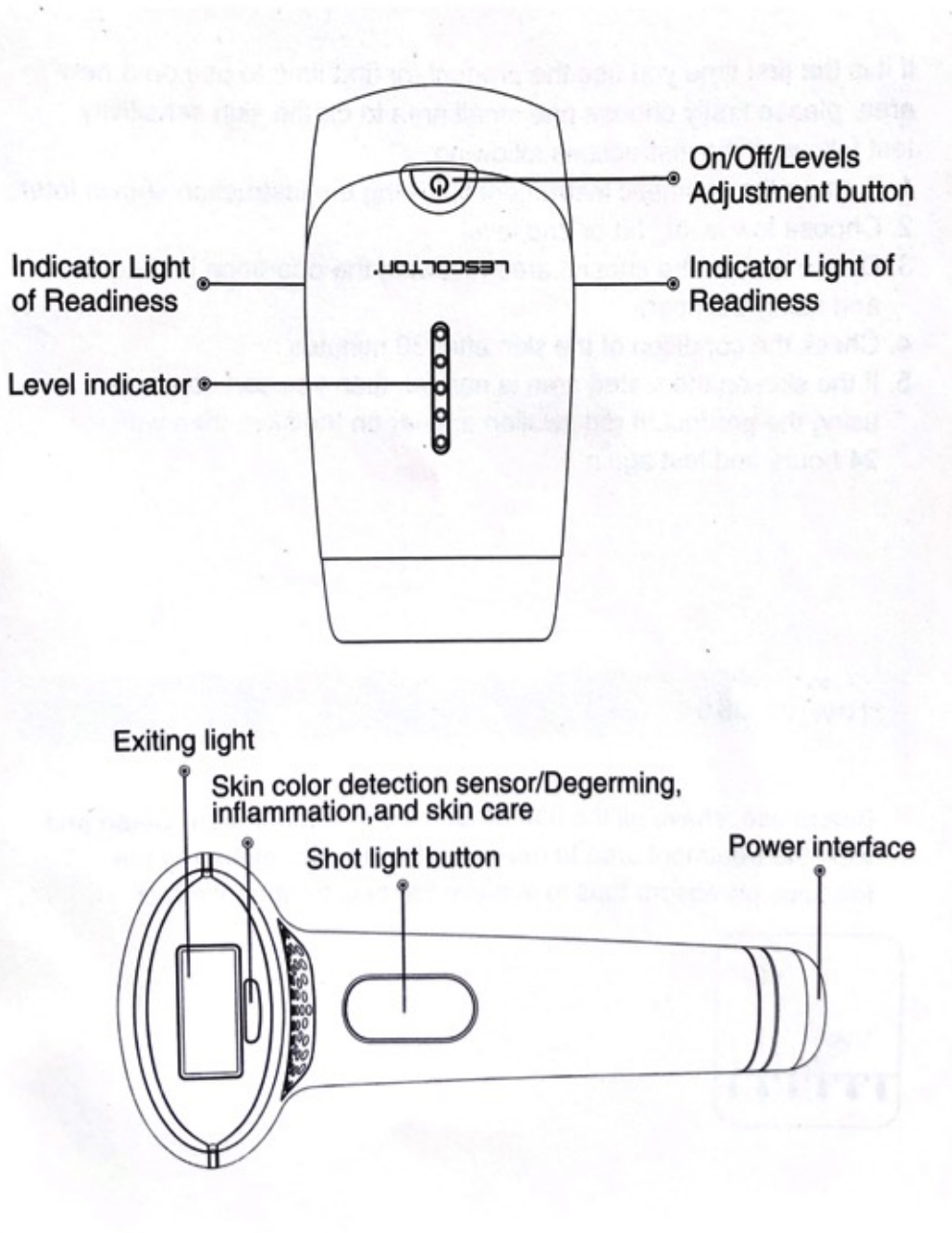

## **MODO DE USO**

### **Tratamiento de depilación permanente**

Antes de usar, preferiblemente remueva el pelo alrededor del área de tratamiento con cera. Si no puede depilarse con cera, puede afeitarse el área.

Inserte el cable de alimentación en la máquina y conéctelo.

Encienda la máquina desde la alimentación presionándola durante 2 o 3 segundos hasta que se encienda el dispositivo.

Con el mismo botón de encendido, seleccione el nivel de potencia deseado. Cada vez que se presiona el botón, aumentará el nivel de potencia. Si en los niveles de potencia más bajos no siente hormigueo o alguna molestia, es mejor seleccionar el nivel de potencia más alto posible.

Apoye la lámpara sobre la piel y una vez que las luces verdes a los lados del dispositivo parpadeen, presione el botón de disparo en el asa del dispositivo. Repita los disparos en la misma área 2 o 3 veces para obtener mejores resultados. Para poder emitir el siguiente disparo, será necesario esperar a que las luces verdes en el costado de la máquina parpadeen.

Para permitir que la máquina dispare automáticamente sin presionar el botón de disparo, puede utilizar al modo de uso automático. Para ingresar al modo automático, presione el botón de disparo durante dos o tres segundos hasta que se emitan dos pitidos. De esta forma, la máquina emitirá los disparos automáticamente cuando la lámpara descansa sobre la piel. Mantenga la lámpara apoyada hasta que se emitan 2 o 3 disparos para obtener mejores resultados.

Para volver al modo de disparo manual, será necesario presionar nuevamente el botón de disparo durante 2 a 3 segundos hasta que se escuchen dos pitidos nuevamente.

## **Intervalos de tratamiento**

Trate cada 3 a 5 días durante el primer mes, semanalmente durante el segundo mes, cada 15 días durante el tercer mes y cada 30 días desde el cuarto mes hasta que elimine permanentemente el vello.

La depilación definitiva es un proceso de varios meses. Los resultados no se ven de inmediato debido a dos razones:

- 1- Es necesario esperar hasta que todo el vello corporal esté en la etapa de crecimiento activo para que pueda verse afectado por el tratamiento. Para esto, es necesario esperar varios meses.
- 2- Es necesario realizar varios tratamientos para el pelo que se encuentra en la etapa de crecimiento activo para debilitar la raíz del cabello hasta que esté permanentemente afectado y el cabello no vuelva a crecer.

Los cambios se notarán a lo largo de los meses.

Las personas con cabello rubio, gris o rojo normalmente necesitarán el doble de sesiones que las personas con cabello negro y marrón, por lo que el tratamiento puede extenderse a entre 6 y 12 meses.

## **Tratamiento de rejuvenecimiento de la piel**

Para este tratamiento será necesario cambiar la lámpara.

Con la máquina apagada, tire de la lámpara para retirarla y coloque la lámpara de rejuvenecimiento.

Una vez que se coloca la lámpara, siga los mismos pasos para encender el dispositivo, seleccione el nivel de potencia y dispare como se explicó anteriormente para la depilación permanente.

## **Especificaciones**

Tamaño de la unidad principal: 182x78x151 mm

Tamaño del paquete (caja): 231x191x93mm

Fuente de alimentación: entrada: 100-240V AC-50 / 60Hz

Peso: 1,1 kg

Área de irradiación: 4 cm<sup>2</sup>

Ambiente externo: Temperatura: - 20 - 50 grados Celsius

Garantía: 4 años de garantía.

## **Tabla de solución de problemas simple**

- Sin alimentación: el cable de alimentación no está bien conectado.
- No se puede encender la máquina: presione el botón "encendido" durante 2 segundos.
- El indicador de nivel parpadea después del arranque: el cartucho no está bien instalado,
- Apagado automático: la máquina se apaga automáticamente después de 5 minutos si no se utiliza.

## **Registro de garantía**

Puede registrar su período de garantía de 4 años a través de este enlace: <https://elosme.com/warranty.php>